



ASIENTOS C7 C8 C9

CONFORT Y BIENESTAR

ASIENTOS C7 C8 C9

CONFORT Y BIENESTAR



BU Medical Equipment
Sede Legale Ed Amministrativa
Headquarters
CEFLA s.c. - Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344

Stabilimento
Plant
CEFLA s.c. - Via Biscocci, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653601

Las características técnicas indicadas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, debido a la constante actualización tecnológica.
Según las normas aplicables, en las zonas fuera de la UE algunos productos y/o características podrían tener diferentes disponibilidad y especificaciones. Aconsejamos ponerse en contacto con el distribuidor de zona.

CASTELLINI.COM

11/2021 CSTOSP211S00



DESCUBRE LA SERIE C7 C8 C9

Estudiados para asegurar una correcta postura y el bienestar en cualquier posición de trabajo, los nuevos asientos para el odontólogo y el auxiliar se integran a la perfección en los espacios de la clínica dental.
Las tres versiones del confort.



ASIENTO C7

C7 es un asiento optimizado para favorecer la actividad del médico ofreciéndole un soporte adecuado del cuerpo. Sus mecanismos de regulación hacen que el asiento y el respaldo se adapten a cualquier complejión y su diseño compacto permite acceder plenamente a todos los elementos del equipo. El material de revestimiento y su técnica de realización aseguran una fácil higienización de las superficies.



ASIENTO

La forma del asiento favorece la posición natural de las piernas y asegura una postura estable y cómoda en todo momento. El acolchado anatómico es suave y confortable y contribuye al bienestar del médico incluso en las intervenciones de larga duración.

RESPALDO

Las reducidas dimensiones del respaldo limitan la superficie de contacto, y en consecuencia la sensación de calor. Además, su forma ofrece un soporte perfecto para la zona lumbar en las fases operativas y durante el diálogo con el paciente.



SOPORTE LUMBAR

El respaldo puede regularse en 9 alturas distintas, para proporcionar un soporte correcto a cualquier tipo de complejión.



REGULACIÓN DEL RESPALDO

El usuario puede inclinar el respaldo de acuerdo con sus propias preferencias y modelar el asiento según su complejión personal.



REGULACIÓN DEL ASIEN TO

La regulación de la altura del asiento permite obtener una posición adecuada para garantizar siempre el apoyo de las piernas y una postura correcta de la columna vertebral. También se pueden añadir 10 cm más incorporando un accesorio opcional.

ASIENTO C9




Gracias al diseño innovador del asiento tipo sillín, el médico puede acercarse al paciente sin necesidad de doblar la espalda, reduciendo de este modo el riesgo de fatiga física. El máximo confort en un volumen reducido a la mínima expresión.



POSTURA IDEAL

La forma de sillín garantiza una correcta inclinación de las piernas, por lo que mejora la postura de la espalda facilitando la aproximación al área de trabajo. Esta ergonomía asegura una sensación de energía y bienestar y minimiza el riesgo de padecer dolores musculoesqueléticos.

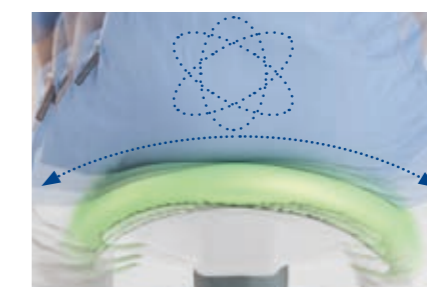

ASIENTO DINÁMICO

Gracias a un mecanismo basculante, el sillín acompaña dinámicamente los movimientos del cuerpo asegurando una postura activa y correcta en cualquier condición operativa. El ángulo de movimiento puede ser regulado fácilmente hasta el bloqueo en eje.



ACOLCHADOS

El acolchado está disponible en una versión sin costuras expuestas, para facilitar las operaciones de higiene, o en Memory Foam (opcional) para ofrecer un altísimo nivel de confort.

ASIENTO C8

El asiento C8 ha sido diseñado para ofrecer la máxima movilidad, un rápido acceso a todos los instrumentos y un apoyo perfecto de los brazos.



ASIENTO SIMÉTRICO

El asiento es circular, por lo que también resulta cómodo en caso de rotación del cuerpo. El asiento y el respaldo están desvinculados, por lo que el operador puede moverse libremente a 360 grados. La estructura del brazo ha sido diseñada para garantizar la estabilidad del antebrazo en cualquier posición.




BRAZO CÓMODO Y FUNCIONAL


El brazo es horizontal y está libre de aristas y revestido con un material antideslizante: de esta manera el auxiliar puede trabajar apoyando siempre el brazo en una posición cómoda y estable, incluso en caso de largas sesiones. En la fase de montaje se puede optar por colocar el brazo en posición centrada o descentrada a la izquierda o a la derecha, en función de las necesidades del consultorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ASIENTO C7

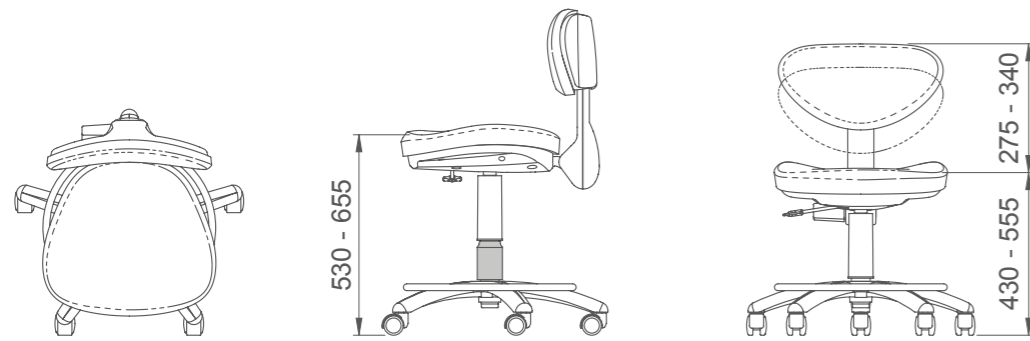

ASIENTO C8

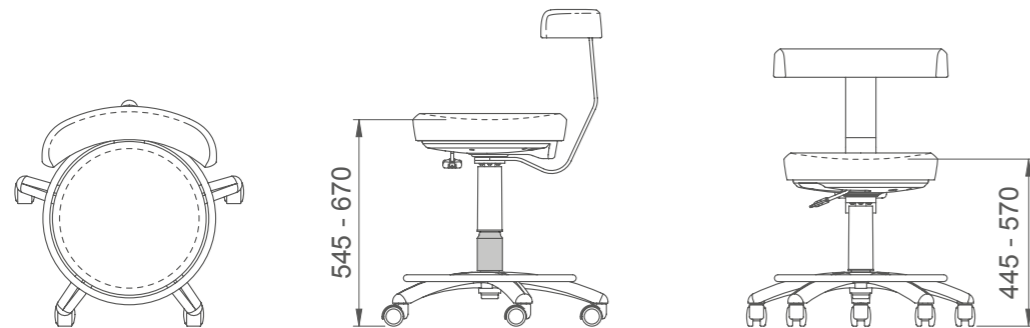

ASIENTO C9

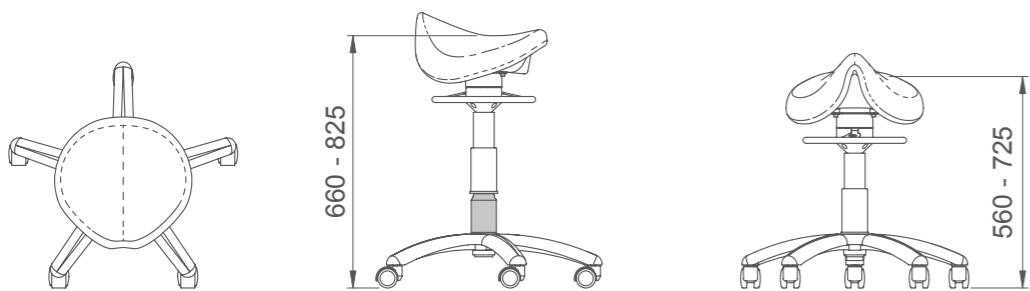

Las medidas de los dibujos están indicadas en milímetros

ASIENTOS C7 C8 C9

CONFORT Y BIENESTAR

	ANILLO REPOSAPIÉS	EXTENSIÓN 10 CM	SISTEMA BALANCE	ACOLCHADO ESTÁNDAR	ACOLCHADO MEMORY FOAM
C7	○	○	-	●	-
C8	○	○	-	●	-
C9	○	○	●	●	○

● = estándar ○ = opcional - = no disponible




EXTENSIÓN

Existe una práctica extensión opcional de 10 cm que permite adaptar perfectamente el asiento a cualquier complejión.



ANILLO REPOSAPIÉS

El anillo reposapiés está disponible como elemento opcional para todos los modelos y ofrece un apoyo sólido y cómodo al operador. Su acabado metálico facilita la limpieza.

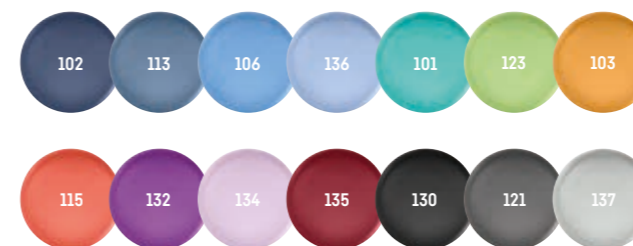

GAMA DE COLORES

102 azul atlántico
113 azul pacífico
106 azul mediterráneo
136 azul índico
101 verde caribe
123 verde polinesia
103 amarillo nevada

115 salmón escocés
132 violeta arándano
134 glicina japonesa
135 rojo veneciano
130 negro grafito
121 gris antracita
137 plateado brillante